

## **sanabell TF11K fascia di fissaggio canula conforto**

### **sanabell TF11K Kanülenhalteband comfort**

Trachealkanülenhalteband mit Klettverschluss.  
Bandlänge gepolstert 11 cm, verstellbar von 15 bis 22 cm.

**REF 77700930 PZN 09304109**

### **sanabell TF11K tube holder comfort**

Tracheal tube holder with Velcro fastener.

Strap length padded 11 cm, adjustable from 15 to 22 cm.



Medizinprodukt  
Medical Device



**sanabell**

4 050625 006662

Notas:  
Asegúrese de que se vigila debidamente a niños y  
personas con discapacidad intelectual para prevenir el riesgo de decanulación accidental.

la cinta de canula con regularidad.

tradicional. Compruebe el apoyo seguro de la canula namínea. Si su reutilización puede averiar su función.

Atención:

con los pasadores. ④

3. Repetir el proceso en el otro lado. ⑤

de la placa de la canula y fijar a la frisa. ⑥

2. Tirar de un lado del extremo a través de la abertura.

1. Colocar la cinta de canula en la nucha del paciente.

Aplicación:

la fricción segura de canulas tradicionales. Longitud de la cinta de canula acolchada de 11 cm, ajustable de 15 a 22 cm.

Cinta de canula tradicional con crepe de adhesivo para

## **E sanabell TF11K cinta de canula confort**

Remarque:

des enfants et des personnes ayant un handicap mental afin d'éviter toute décanulation accidentelle.

Veuillez observer le devoir de surveillance à l'égard

fixation de canule à intervalles réguliers.

Descente exclusivement à l'usage unique. La réuti-

lisation de la bande de fixation de canule d'après

attachées de manière sûre. Remplacez la bande de

trachéale et la bande de fixation de canule sont bien

sa fonction. Vérifiez périodiquement que la canule

est fixée à intervalles réguliers. La remplacement

de la canule est recommandé si elle devient

légèrement décolorée ou si elle devient

humide ou si elle devient difficile à éliminer.


Descente exclusivement à l'usage unique. La réuti-

lisation de la bande de fixation de canule d'après


attachées de manière sûre. Remplacez la bande de

trachéale et la bande de fixation de canule sont bien


sa fonction. Vérifiez périodiquement que la canule

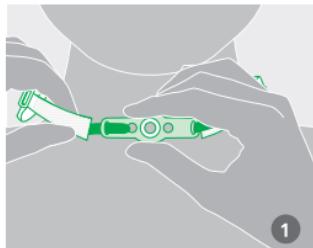

1

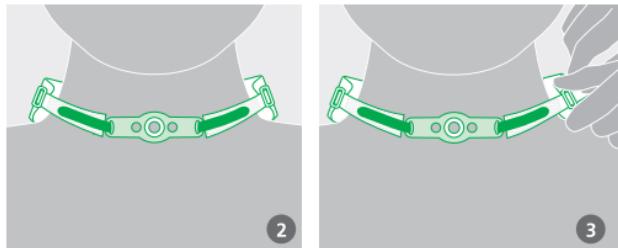

2

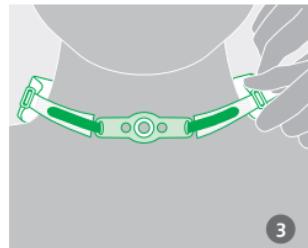

3

## D sanabelle TF11K Kanülenhalteband comfort

Trachealkanülenhalteband mit Klettverschluss zur sicheren Fixierung von Trachealkanülen. Bandlänge gepolstert 11 cm, verstellbar von 15 bis 22 cm.

### Anwendung:

1. Das Kanülenhalteband in den Nacken des Patienten legen.
2. Auf einer Seite das Klettende durch die Öffnung am Kanülenschild ziehen und auf dem Flausch befestigen. ①
3. Den Vorgang auf der anderen Seite wiederholen. ②
4. Die individuelle Tragelänge mit den Schiebern an den kleinen Bändchen einstellen. ③

### Achtung:

Nur zum Einmalgebrauch. Wiederverwendung kann die Funktion beeinträchtigen. Regelmäßig den sicheren Halt von Trachealkanüle und Kanülenhalteband überprüfen. Das Kanülenhalteband regelmäßig austauschen.

### Hinweis:

Achten Sie auf die Einhaltung der Aufsichtspflicht gegenüber Kindern und Menschen mit geistiger Behinderung, um der Gefahr einer versehentlichen Dekanülierung vorzubeugen.

## GB sanabelle TF11K tube holder comfort

Tracheal tube holder with Velcro fastener for secure fixing of tracheal cannulas. Strap length padded 11 cm, adjustable from 15 to 22 cm.

### Use:

1. Lay the tube holder in the nape of the patient's neck.

2. Pull the Velcro end through the opening on the cannula flange on one side and fasten to the fleece. ①

3. Repeat the operation on the other side. ②

4. Adjust the individual wearing length using the slides on the small straps. ③

### Important:

For single use only. Reuse may impair function. Check the secure hold of the tracheal cannula and the tube holder regularly. Frequently replace the tube holder.

### Note:

It is recommended to assure the supervision of children and people with intellectual disabilities in order to prevent the risk of an accidental decannulation.

## F sanabelle TF11K bande de fixation de canule confort

Band de fixation de canule trachéale à fermeture auto-agrippante de type velcro pour fixer des canules trachéales en toute sécurité. Longueur de la bande rembourrée 11 cm, réglable de 15 à 22 cm.

### Utilisation:

1. Placer la bande de fixation de canule sur la nuque du patient.
2. Faire passer l'une des extrémités de la bande velcro à travers l'ouverture pratiquée dans la plaque de la canule et la fixer sur la bande auto-agrippante à boucles. ①
3. Répéter cette manipulation avec l'autre extrémité de la bande velcro. ②
4. Adapter la longueur de la bande à l'encolure de chaque porteur à l'aide des curseurs de réglage disposés sur les bandelettes. ③